

## GR110DA


### GR Serisi Otoklav

- » GR serisi akıllı otoklavlar sürekli güncelleme ve ürün yenileme ihtiyaçlarından sizi muaf tutar.
- » 40 cm çapındaki ağır ölçülü sterilizatör odası.
- » Akıllı kontrol sistemi, yalnızca sterilizasyonun toplam süreç kontrollerin.
- » Laboratuvar atıklarının etkin sterilizasyonu için özel atık sterilizasyon prosedürleri oluşturulmuştur.
- » Avrupa'da sıcak satışta CE standardına göre en iyi kurutma
- » Sterilizasyon nesnesi hala güvensiz durumdayken yanmasını önlemek için sterilizasyon nesnesinin termal ataletine göre farklı soğutma kilidi açma sıcaklıkları ayarlayabilir.
- » Katıların ve sıvıların sterilize edilmesi, ısıtılması ve kurutulması, agarların eritilmesi ve ısıtılması için altı sterilizasyon prosedürü ve ısıtma prosedürü önceden belirlenmiştir.
- » Benzersiz sekiz sütunlu eşit olarak dağıtılmış kilitleme cihazı, yaygın kilitleme cihazlarından daha güvenilirdir.



| Model                     | GR60DA                                                                   | GR85DA           | GR110DA          |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                           | GR60DF                                                                   | GR85DF           | GR110DF          |
|                           | GR60DR                                                                   | GR85DR           | GR110DR          |
| Model farkları            | DA: Standart+ Soğutma Fanı / DF: DA+ Otomatik Su Besleme/ DR:DF+ Kurutma |                  |                  |
| Kapasite                  | 60                                                                       | 85               | 110              |
| Boyutlar(UxGxY,mm))       | 660x644x980(DA)                                                          | 660x644x980(DA)  | 660x644x1180(DA) |
| Bölme (Çap*H,mm)          | 400x505                                                                  | 400x700          | 400x895          |
| Oranlı Güç Kaynağı        | 2900                                                                     | 4600             | 4600             |
| Paslanmaz Sepet(Çap*H,mm) | (360x200)x2                                                              | (360x280)x2      | (360x250)x3      |
| Güç Girişi                | 220V,16A 50/60Hz                                                         | 220V,32A 50/60Hz | 220V,32A 50/60Hz |
| Sıcaklık Doğruluğu        | 0.1 °C                                                                   |                  |                  |
| Çalışma Aralığı           | 5-45 °C, Bağıl Nem 10%-85%                                               |                  |                  |
| Bölme Malzemesi           | SUS 304                                                                  |                  |                  |
| Sterilizasyon Sıcaklığı   | 105-138 °C, 152 °C'ye tasarlanabilir                                     |                  |                  |
| Sterilizasyon Süresi      | 1-6000 dakika                                                            |                  |                  |
| Erime Sıcaklığı           | 60-100 °C                                                                |                  |                  |
| Erime Süresi              | 1-6000 dakika                                                            |                  |                  |
| Isınma Sıcaklığı          | 45-60 °C                                                                 |                  |                  |

## Kullanımı Kolay Kontrol Paneli

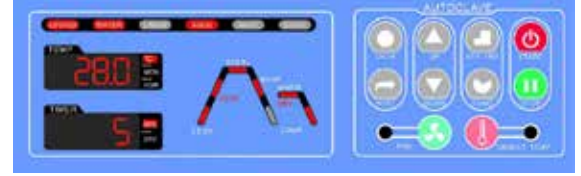

|                                        |                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Isınma Süresi                          | 1-9999 dakika                                                                                                                                    |
| Kurutma(DR Modelde)                    | 1-300 dakika, kurutma sıcaklığı 80-140 °C                                                                                                        |
| Soğutma Kilidi AÇIK Sıcaklık           | 40-80 °C Sıvı Çevrim, 40-99 °C Normal Çevrim                                                                                                     |
| Sterilizasyon Çevrimi                  | 1. Sıvı 2. Sıvı Isıtma 3. Katılar 4. Sarılmış Alet 5. Kumaş 6. Lastik 7. Hızlı 8. Atık 9. Ağar Erimesi 10. Kendi Kendine Tanımlanmış 11. Kurutma |
| Sterilizasyon Çevrimi Sayısı           | DA Modeller 20'ye kadar çıkabilir, DF/DR 60'a kadar çıkabilir                                                                                    |
| Egzoz Modu                             | İçinde bir buhar toplama şişesi bulunan otomatik dahili boşaltma. Egzoz hızı 6 farklı seviyede seçilebilir.                                      |
| Kapak Açma Yolu                        | Kapak Açık                                                                                                                                       |
| Buhar ve Su Tankı                      | DA: Gömülü 2 buhar toplayıcı, DF: Gömülü 2 buhar toplayıcı ve 28 litre su tankı DR: Gömülü buhar toplayıcısı ve 28 litre su tankı                |
| Önceden Ayarlanmış Zamanlayıcı Aralığı | Otomatik başlangıçla 6 güne kadar ayarlanabilir.                                                                                                 |
| Basınç Ölçer Görüntüleme Aralığı       | -0.1, -0.5 Mpa                                                                                                                                   |
| Basınç Kontrolör                       | Max: 0.27 Mpa, Tasarlanabilir:0.35Mpa<br>Süper hızlı mikro bilgisayar kontrolü                                                                   |