

GR85DR


GR Serisi Otoklav

- » GR serisi akıllı otoklavlar sürekli güncelleme ve ürün yenileme ihtiyaçlarından sizi muaf tutar.
- » 40 cm çapındaki ağır ölçülü sterilizatör odası.
- » Akıllı kontrol sistemi, yalnızca sterilizasyonun toplam süreç kontrollerin.
- » Laboratuvar atıklarının etkin sterilizasyonu için özel atık sterilizasyon prosedürleri oluşturulmuştur.
- » Avrupa'da sıcak satışta CE standardına göre en iyi kurutma
- » Sterilizasyon nesnesi hala güvensiz durumdayken yanmasını önlemek için sterilizasyon nesnesinin termal ataletine göre farklı soğutma kilidi açma sıcaklıkları ayarlayabilir.
- » Katıların ve sıvıların sterilize edilmesi, ısıtılması ve kurutulması, agarların eritilmesi ve ısıtılması için altı sterilizasyon prosedürü ve ısıtma prosedürü önceden belirlenmiştir.
- » Benzersiz sekiz sütunlu eşit olarak dağıtılmış kilitleme cihazı, yaygın kilitleme cihazlarından daha güvenilirdir.



Model	GR60DA	GR85DA	GR110DA
	GR60DF	GR85DF	GR110DF
	GR60DR	GR85DR	GR110DR
Model farkları	DA: Standart+ Soğutma Fanı / DF: DA+ Otomatik Su Besleme/ DR:DF+ Kurutma		
Kapasite	60	85	110
Boyutlar(UxGxY,mm))	660x644x980(DA)	660x644x980(DA)	660x644x1180(DA)
Bölme (Çap*H,mm)	400x505	400x700	400x895
Oranlı Güç Kaynağı	2900	4600	4600
Paslanmaz Sepet(Çap*H,mm)	(360x200)x2	(360x280)x2	(360x250)x3
Güç Girişi	220V,16A 50/60Hz	220V,32A 50/60Hz	220V,32A 50/60Hz
Sıcaklık Doğruluğu	0.1 °C		
Çalışma Aralığı	5-45 °C, Bağıl Nem 10%-85%		
Bölme Malzemesi	SUS 304		
Sterilizasyon Sıcaklığı	105-138 °C, 152 °C'ye tasarlanabilir		
Sterilizasyon Süresi	1-6000 dakika		
Erime Sıcaklığı	60-100 °C		
Erime Süresi	1-6000 dakika		
Isınma Sıcaklığı	45-60 °C		

Kullanımı Kolay Kontrol Paneli

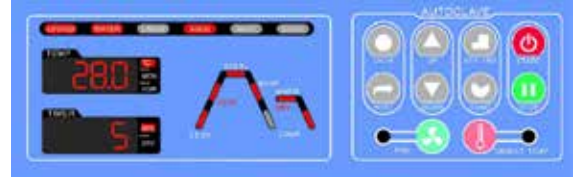

Isınma Süresi	1-9999 dakika
Kurutma(DR Modelde)	1-300 dakika, kurutma sıcaklığı 80-140 °C
Soğutma Kilidi AÇIK Sıcaklık	40-80 °C Sıvı Çevrim, 40-99 °C Normal Çevrim
Sterilizasyon Çevrimi	1. Sıvı 2. Sıvı Isıtma 3. Katılar 4. Sarılmış Alet 5. Kumaş 6. Lastik 7. Hızlı 8. Atık 9. Ağar Erimesi 10. Kendi Kendine Tanımlanmış 11. Kurutma
Sterilizasyon Çevrimi Sayısı	DA Modeller 20'ye kadar çıkabilir, DF/DR 60'a kadar çıkabilir
Egzoz Modu	İçinde bir buhar toplama şişesi bulunan otomatik dahili boşaltma. Egzoz hızı 6 farklı seviyede seçilebilir.
Kapak Açma Yolu	Kapak Açık
Buhar ve Su Tankı	DA: Gömülü 2 buhar toplayıcı, DF: Gömülü 2 buhar toplayıcı ve 28 litre su tankı DR: Gömülü buhar toplayıcısı ve 28 litre su tankı
Önceden Ayarlanmış Zamanlayıcı Aralığı	Otomatik başlangıçla 6 güne kadar ayarlanabilir.
Basınç Ölçer Görüntüleme Aralığı	-0.1, -0.5 Mpa
Basınç Kontrolör	Max: 0.27 Mpa, Tasarlanabilir:0.35Mpa Süper hızlı mikro bilgisayar kontrolü